

CLEAR CHOICE

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

hCG URIN-SCHWANGERSCHAFTSTEST, Selbsttest

ANWENDUNGSZWECK:

hCG Urinschwangerschaftstest misst das Vorhandensein des Hormons humanes Choriongonadotropin (hCG) im menschlichen Urin zur Früherkennung einer Schwangerschaft.

ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG:

Das hCG wird durch die Plazenta während der Schwangerschaft erzeugt, kurz nachdem sich der Embryo in die Gebärmutterwand eingenistet hat. Gewöhnlich kann das hCG durch einen Hausschwangerschaftstest innerhalb von 3-4 Tagen nach dem Empfängnis/Implantation bestimmt werden. Dieser Test ist so empfindlich, dass er zu jeder Tageszeit, 6 Tage vor Ihrer ausbleibende Menstruation (5 Tage vor dem ersten Tag der erwarteten Menstruation) verwendet werden kann.

Je weiter in die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto höher ist der hCG Anteil in Ihrem Urin. Mit dieser Methode ist das hCG im Urin schon bei einer Konzentration ab 10 mIU/ml oder höher nachweisbar. Bei Frauen, die nicht schwanger sind, beträgt die Konzentration von hCG in der Regel 5,0 mIU/ml. Während der letzten Menstruationszeit beträgt der hCG-Wert im Urin etwa 100 mIU/ml; die Maximalwerte 100 000 bis 200 000 mIU/ml werden am Ende des ersten Trimesters erreicht.

INHALT:

Jeder Beutel enthält:

1. hCG Urin Schwangerschaftstest
2. Trockenmittel (wegwerfen - nicht verzehren)

Jede Box enthält:

1. Ein Folienbeutel
2. Gebrauchsanweisung

LAGERUNG UND STABILITÄT:

Das Testkit kann bei einer Raumtemperatur (2 °C zu 30 °C) im versiegelten Beutel bis zum Ablaufdatum benutzt werden. Das Testkit vor direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze schützen.

VORSICHTSMAGNAMEN:

1. Nur für IN-VITRO DIAGNOSTIC (IVD) VERWENDEN, NICHT für inneren Gebrauch

2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Durchführung des Tests aufmerksam durch.

3. Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden.

4. Verwenden Sie die Teststreifen nicht erneut. Entsorgen Sie sie nach jedem einzelnen Gebrauch.

5. Verwenden Sie die Urinproben und gebrauchte Testgeräte so behandeln, als wären sie potenziell infektiös. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

6. Sobald der Folienbeutel geöffnet worden ist, sollte der Teststreifen sofort verwendet werden. Ist der Test der Luftfeuchtigkeit der Umwelt dauerhaft ausgesetzt, kann sich das Produkt verschlechtern.

7. Behandeln Sie die Urinproben und gebrauchte Testgeräte so behandeln, als wären sie potenziell infektiös. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

8. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TESTVERFAHREN:

1. WANN KANN ICH DEN TEST DURCHFÜHREN?

Sie können diesen Schwangerschaftstest 6 Tage vor dem Tag Ihrer nichteintretenden Periode (5 Tage vor dem Tag der erwarteten Periode), zu jeder Uhrzeit durchführen.

2. PROBLEMBEHANDLUNG UND HANDHABUNG:

Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Behälter gesammelt werden. Die erste Urinprobe am Morgen wird bevorzugt, da sie allgemein die höchste Konzentration von hCG enthält; jedoch können Urinproben zu jeder Zeit des Tages entnommen werden.

3. WIE WIRD DER TEST DURCHFÜHRT?

1. Bringen Sie den versiegelten Beutel und den Urin auf Raumtemperatur. Um den Test zu beginnen, öffnen Sie den versiegelten Beutel und entfernen Sie die Abdeckung.


2. Halten Sie das runde Ende des Deckels mit einer Hand. Verwenden Sie die andere Hand, um das Testgerät auseinander zu ziehen und das Absorptionsmittel freizulegen.

3. Der absorbierende Teil zeigt nach unten, halten Sie diesen Teil für etwa 10 Sekunden in den Urinstrom, damit er völlig durchnässt ist. Ansonsten sammeln Sie den Urin in einem sauberen Behälter und tauchen die Hälfte des saugfähigen/absorbierenden Teils für mindestens 10 Sekunden in den Urin.

4. Entfernen Sie die Kappe und warten auf die Farbstreifen, bis sie erscheinen. Abhängig von der Konzentration des hCG in der Urinprobe können positive Ergebnisse in mindestens 40 Sekunden beobachtet werden. Um jedoch ein negatives Ergebnis zu bestätigen, ist die ganze Reaktionszeit (5 Minuten) erforderlich. Lesen Sie Ergebnisse nach 10 Minuten nicht mehr ab.

5. Entsorgen Sie den Test nach dem Gebrauch. Werfen Sie die verwendeten Teststreifen wenn möglich in einen speziellen Behälter und betrachten es so, als ob es ansteckend wäre. Nicht im normalen Hausmüll entsorgen.

4. AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

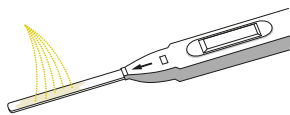

NEGATIV: Nur eine sichtbare farbige Linie im Kontrollbereich, keine farbige Linie im Testbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, bedeutet negativ, kein hCG ist im Urin festgestellt worden. Das bedeutet, dass Sie entweder nicht schwanger sind oder Sie zu früh geprüft haben. Wenn Sie nicht sicher sind, wiederholen Sie den Test in 48 Stunden.

POSITIV: Zwei sichtbare farbige Linien sowohl im Testbereich als auch im Kontrollbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, heißt positiv, dann bedeutet das, dass es eine starke Möglichkeit gibt, dass Sie schwanger sind — in Ihrem Urin ist hCG festgestellt worden. Eine Linie kann schwächer sein als die andere, sie müssen nicht zusammenpassen, und das ist auch ein positives Ergebnis

UNGÜLTIG: Keine sichtbare farbige Linien überhaupt oder nur eine farbige Linie im Testbereich, die anzeigen, dass der Teststreifen ungültig ist. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen!

REAGENZEN:

hCG Schwangerschaftsuntersuchungstreifen pro Folienbeutel.

Inhaltstoffe: Das Testgerät besteht aus kolloidalem Gold und ist mit anti β -hCG Antikörpern beschichtet; NC-Membran, die mit der Maus gegen α -hCG Antikörper und Kaninchen Anti-Maus IgG beschichtet ist.

VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN:

1. Alkohol kann das Testergebnis beeinflussen. Es wird nicht empfohlen, den Test nach dem Alkoholkonsum zu benutzen.

2. Gelegentlich geben Urinproben, die weniger als 10 mIU/ml enthalten, auch positive Ergebnisse an.

3. Wenn Sie den Test zu früh ausführen, kann das hCG Niveau noch zu niedrig sein und kann so ein negatives Ergebnis anzeigen. In diesem Fall sollte eine andere Urinprobe mindestens 48 Stunden später entnommen und geprüft werden.

4. Das hCG Niveau kann mehrere Wochen nach einer normalen Entbindung, Entbindung durch Kaiserschnitt, spontaner Abtreibung oder therapeutischer Abtreibung feststellbar bleiben.

5. In Fällen, wo ein sehr hohes Niveau von hCG vorhanden ist (> 500,000 mIU/ml) kann ein falsches negatives Ergebnis wegen einer "Pro-Zonen"-Wirkung vorkommen. Wenn immer noch eine Schwangerschaft vermutet wird, einfach die Probe 1:1 mit entsalztem Wasser verdünnen und erneut testen.

6. Wenn eine Urinprobe zu verdünnt ist (d. h.: niedriges spezifisches Gewicht) kann sie kein vertretbares Niveau von hCG enthalten. Wenn eine Schwangerschaft noch vermutet wird, sollte eine erste Morgenurinprobe entnommen werden und nach 48 Stunden erneut getestet werden.

7. Wie bei jedem Diagnoseverfahren, sollte der Anwender die durch die Verwendung dieses Kits gewonnenen Daten im Lichte anderer klinischer Informationen auswerten und seinen Arzt für die endgültige Diagnose der Schwangerschaft konsultieren, bevor er eine Entscheidung von medizinischer Relevanz trifft.

Hersteller: FORANS Medical GmbH, Martener Str. e 275, 44379 Dortmund, Deutschland

Vertriebs Händler: SIA FORANS Pipilsetas, Krustkalni novads, Kekavas pagasts, LV-2111, Latvija, info@forans.lv



In-vitro-Diagnostik



Kann nicht wiederverwendet werden



Beachten Sie die Gebrauchsanleitung



Vor Nässe schützen



Vor Sonnenlicht schützen



Abfall muss in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien entsorgt werden.



Aufbewahren bei einer Temperatur zwischen 2-30°C



Tests pro Verpackung



Gültig bis



Hersteller



Herstellungsdatum



Chargenbezeichnung

REV-0/2019.03



0483