

# CLEAR CHOICE

## INSTRUCTION

### HCG Urine Pregnancy Test ONE • HCG Urine Pregnancy Test PLUS

• Model: Strip • For Self-Testing

**INTENDED USE:**  
HCG Urine Pregnancy Test Intended for Self-Testing, measures the presence of the hormone Human Chorionic Gonadotropin (hCG) in human urine for the early detection of pregnancy.

**SUMMARY AND EXPLANATION:**  
hCG is produced by the placenta during pregnancy, shortly after the embryo attaches to the uterine lining. Usually hCG can be detected by a home pregnancy test within 3-4 days after implantation.

So sensitive it may be used as early as 6 days before the day of your missed first period (5 days before day of expected first period), any time of day.  
The further into the pregnancy you are, the higher the levels of hCG in your urine. This pregnancy dip strip detects hCG in urine at a concentration of 10 mIU/ml (mIU=International Units) or greater. The concentration of hCG in non-pregnant women is normally 5.0 mIU/mL. At the time of the last missed menstrual period, urine hCG levels are about 100 mIU/ml with peak levels of 100,000 to 200,000 mIU/ml seen at the end of the first trimester.

**PACKAGE CONTENTS:**  
1 HCG Urine Pregnancy Test One: One foil pouch with 1 HCG Urine Pregnancy Strip Test, Desiccant (Discard - Do not eat), Instruction for use.

2 HCG Urine Pregnancy Test PLUS: Two foil pouches with 1 HCG Urine Pregnancy Strip Test each, Desiccant (Discard - Do not eat), Instruction for use.

**STORAGE AND STABILITY:**  
The test kit can be stored at temperature 2°C to 30 °C in the sealed pouch to the date of expiration. The test kits should be kept away from direct sunlight, moisture and heat.

- PRECAUTIONS:**
- 1. **FOR IN-VITRO DIAGNOSTIC (IVD) USE ONLY, NOT for internal use.**
  - 2. Read directions for use carefully before performing this test.
  - 3. Do not use beyond the expiration date.
  - 4. Do not reuse the test strip. Discard it in the dustbin after single use.
  - 5. Do not use the strip if the foil pouch is damaged.
  - 6. Hold the test strip by the handle only (coloured end).
  - 7. Once the foil pouch has been opened, the test strip should be used immediately. Prolonged exposure to ambient humidity will cause product deterioration.
  - 8. Treat urine samples and used test devices as if they are potentially infectious. Avoid contact with skin.
  - 9. Keep out of reach of children.


**TEST PROCEDURE:**  
**1. WHEN CAN I CARRY OUT THE TEST?**  
You can take this pregnancy test from 6 days before the day of your missed period (5 days before day of expected period), any time of day.

**2. SPECIMEN COLLECTION AND HANDLING**  
A urine specimen must be collected in a clean and dry container. The first urine specimen in the morning is preferred since it generally contains the highest concentration of hCG; however, urine specimens collected at any time of the day may be used.

- 3. TO CARRY OUT TEST**
- Bring the sealed pouch to room temperature. To begin testing, open the sealed pouch and remove the strip. Do not touch the arrow end and the middle part of the strip.
  - Place the test strip vertically (straight) into the urine sample; make sure the arrows are pointing down. Do not allow the urine surface to go above the MAX (maximum) level line (marked by arrows) on the test strip.
  - Remove the strip from the urine after about 10 seconds and lay the strip on a clean, dry surface.
  - Wait for coloured bands to appear. Depending on the concentration of hCG in the urine specimen, positive results may be observed in as short as 40 seconds. However, to confirm a negative result, the complete reaction time (5 minutes) is required. Do not read results after 10 minutes.
  - Discard the test after use. Put the used test into special container if possible and regard it as if is infectious. Don't litter.

**4. INTERPRETATION OF RESULTS**  
**NEGATIVE:** Only one visible coloured band in control region, no coloured band in test region, which indicate the result of the test is negative, no hCG has been detected in the urine.  
This means you are either not pregnant or you have tested too early. If you are not sure repeat the test in 48 hours.

**POSITIVE:** Two visible coloured bands in both test region and control region, which indicate the result of the test is positive, then this means there is a strong possibility that you are pregnant — hCG has been detected in your urine.

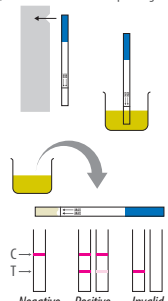

One line may be lighter than the other, do to this still is a positive result.  
**INVALID:** No visible coloured band(s) at all, or only one coloured band in test region, which indicate the kit is invalid. Repeat the test with a new test kit!

**REAGENTS:**  
Test device comprised colloidal gold coated with anti-β-HCG antibody; NC membrane coated with mouse anti-α-HCG antibody and rabbit anti mouse IgG.

**LIMITATION OF THE PROCEDURE:**  
1. Alcohol may interfere with the test result. It is not recommended to use the test after drinking alcohol.  
2. Occasionally urine specimens containing less than 10 mIU/ml can also yield positive results.  
3. If you test too early, hCG level may still be low and so you give a negative result. In this case, another urine specimen should be obtained at least 48 hours later and tested.  
4. hCG levels may remain detectable for several weeks after normal delivery, delivery by caesarian section, spontaneous abortion or therapeutic abortion.  
5. In cases where very high levels of hCG are present (>500,000 mIU/ml) a false negative result can occur due to a "Prozone" effect. If pregnancy is still suspected, simply dilute specimen 1:1 with deionized water and retest.  
6. If an urine sample is too dilute (i.e., low specific gravity) it may not contain a representative level of hCG. If pregnancy is still suspected, a first morning urine sample should be obtained and retested 48 hours later.  
7. As is true with any diagnostic procedure, the user should evaluate data obtained by using this kit in light of other clinical information and consult their doctor for the final diagnosis of pregnancy before making any decision of medical relevance.

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

• HCG Urin-Schwangerschaftstest ONE • HCG Urin Schwangerschaftstest PLUS  
• Modell: Teststreifen • Zum Selbsttest

**BEABSICHTIGTER GEBRAUCH:**  
Nur für den professionellen Gebrauch. Der zum Selbsttest bestimmte HCG-Urin-Schwangerschaftstest misst das Vorhandensein des Hormons Human Chorionic Gonadotropin (hCG) im menschlichen Urin zur Früherkennung einer Schwangerschaft.

**ZUSAMMENFASSUNG UND AUFLÄUTERUNG**  
Das hCG wird durch die Plazenta während der Schwangerschaft erzeugt, kurz nachdem sich der Embryo in der Gebärmutterhöhle eingenistet hat. Gewöhnlich kann das hCG durch einen Hauschwangerschaftstest innerhalb von 3-4 Tagen nach der Implantation entdekt werden. Diese Empfindlichkeit wird schon 6 Tage vor ihrer ausbleibenden festen Periode erreicht. (5 Tage vor dem Tag der erwarteten festen Periode), kann zu jeder Uhrzeit verwendet werden.

Je weiter in die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto höher ist der hCG Anteil in Ihrem Urin. Dieser Schwangerschaftsteststreifen erkennt hCG im Urin in einer Konzentration von 10 mIU / ml (mIU = internationale Einheiten) oder höher. Die Konzentration von hCG bei nicht schwangeren Frauen ist normalerweise 5,0 mIU/ml. Zur Zeit der letzten nicht eingetretenen Menstruation liegt das Niveau von hCG im Urin über 100 mIU/ml und kann zum Ende des ersten Drittels der Schwangerschaft Maximalwerte von 100.000 bis 200.000 mIU/ml erreichen.

**PKUNGSINHALT:**  
1. HCG-Urin-Schwangerschaftstest ONE: Ein Folienbeutel mit 1 HCG-Urin-Schwangerschaftsteststreifen-Test, Trockenmittel (entsorgen - nicht essen), Gebrauchsanweisung.

2. HCG-Urin-Schwangerschaftstest PLUS: Zwei Folienbeutel mit je 1 HCG-Urin-Schwangerschaftsteststreifen-Test, Trockenmittel (entsorgen - nicht essen), Gebrauchsanweisung.

**LAGERUNG UND STABILITÄT:**  
Das Testkit kann bis zum Verfallsdatum bei einer Temperatur von 2 °C bis 30 °C in versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Die Testkits sollten vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze geschützt werden.

**VERSICHERUNGSMÄßIGHEIT:**  
**1. NUR FÜR IN-VITRO DIAGNOSTIK (IVD) VERWENDEN, NICHT FÜR INNEREN GEBRAUCH.**

2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Durchführung des Tests aufmerksam durch.
3. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
4. Verwenden Sie den Teststreifen nicht erneut. Entsorgen Sie es nach einmaligem Gebrauch im Müllereimer.
5. Verwenden Sie den Teststreifen nicht, wenn der Folienbeutel beschädigt ist.
6. Halten Sie den Teststreifen nur am Griff (farbiges Ende).
7. Nach dem Öffnen des Folienbeutels werden den Teststreifen sofort verwendet werden. Längerer Kontakt mit der Umgebungsfeuchtigkeit führt zu einer Verschlechterung des Produkts.
8. Behandeln Sie die Urinproben und gebrauchte Testgeräte so, als wären sie potenziell infektiös. Kontakt mit der Haut vermeiden.
9. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**PROFIVERFAHREN**  
**1. WANN KANN ICH DEN TEST DURCHFÜHREN?**  
Sie können diesen Schwangerschaftstest ab 6 Tage vor dem Tag Ihrer nichterwartenden Periode (5 Tage vor dem Tag der erwarteten Periode), zu jeder Uhrzeit durchführen.

**2. PROBLEMLÖSUNG UND HANDHABUNG:**  
Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Gefäß gesammelt werden. Die erste Urinprobe am Morgen wird bevorzugt, da sie allgemein die höchste Konzentration von hCG enthält; jedoch können Urinproben zu jeder Zeit des Tages entnommen werden.

**3. WIE WIRD DER TEST DURCHFÜHRT?**  
1. Die versiegelte Verpackung muss Raumtemperatur haben. Öffnen Sie den versiegelten Beutel und entfernen Sie den Teststreifen, zu dem mit Testen zu geben.  
2. Legen Sie den Teststreifen senkrecht (gerade) in die Urinprobe. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile nach unten zeigen. Lassen Sie die Urinprobe fließen über die MAX (maximale) Fülllinie (durch Pfeile gekennzeichnet) auf dem Teststreifen hinausgehen.  
3. Entfernen Sie den Streifen nach ca. 10 Sekunden aus dem Urin und legen Sie ihn auf eine saubere, trockene Oberfläche.  
4. Warten Sie, bis farbige Bänder angezeigt werden. Abhängig von der hCG-Konzentration in der Urinprobe können bereits nach 40 Sekunden positive Ergebnisse beobachtet werden. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, ist jedoch die vollständige Reaktionszeit (5 Minuten) erforderlich. Lesen Sie die Ergebnisse nach 10 Minuten nicht mehr ab.  
5. Entsorgen Sie den Test nach dem Gebrauch. Geben Sie den gebrauchten Teststreifen nach Möglichkeit in einen speziellen Behälter und betrachten Sie ihn als infektiös. Nicht wegwerfen.

**4. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE**  
**NEGATIV:** Nur ein sichtbares farbiges Band im Kontrollbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, bedeutet negativ, kein hCG ist im Urin entdeckt worden. Das bedeutet, dass Sie entweder nicht schwanger sind oder Sie zu früh geprüft haben. Wenn Sie nicht sicher sind, wiederholen Sie den Test in 48 Stunden.  
**POSITIV:** Zwei sichtbare farbige Bänder sowohl im Testbereich als auch im Kontrollbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, heißt positiv, das bedeutet das, dass es eine starke Möglichkeit gibt, dass Sie schwanger sind — in Ihrem Urin ist hCG entdeckt worden. Eine Linie kann schwächer sein als die andere, sie müssen nicht zusammenpassen, und das ist auch ein positives Ergebnis  
**UNGÜLTIG:** Kein sichtbares farbiges Band (Bänder) überhaupt oder nur ein farbiges Band im Testbereich, die anzeigen, dass der Teststreifen ungültig ist. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen!

**PRÜFVERFAHREN**  
**1. WANN KANN ICH DEN TEST DURCHFÜHREN?**  
Sie können diesen Schwangerschaftstest ab 6 Tage vor dem Tag Ihrer nichterwartenden Periode (5 Tage vor dem Tag der erwarteten Periode), zu jeder Uhrzeit durchführen.

**2. PROBLEMLÖSUNG UND HANDHABUNG:**  
Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Gefäß gesammelt werden. Die erste Urinprobe am Morgen wird bevorzugt, da sie allgemein die höchste Konzentration von hCG enthält; jedoch können Urinproben zu jeder Zeit des Tages entnommen werden.

**3. WIE WIRD DER TEST DURCHFÜHRT?**  
1. Die versiegelte Verpackung muss Raumtemperatur haben. Öffnen Sie den versiegelten Beutel und entfernen Sie den Teststreifen, zu dem mit Testen zu geben.  
2. Legen Sie den Teststreifen senkrecht (gerade) in die Urinprobe. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile nach unten zeigen. Lassen Sie die Urinprobe fließen über die MAX (maximale) Fülllinie (durch Pfeile gekennzeichnet) auf dem Teststreifen hinausgehen.  
3. Entfernen Sie den Streifen nach ca. 10 Sekunden aus dem Urin und legen Sie ihn auf eine saubere, trockene Oberfläche.  
4. Warten Sie, bis farbige Bänder angezeigt werden. Abhängig von der hCG-Konzentration in der Urinprobe können bereits nach 40 Sekunden positive Ergebnisse beobachtet werden. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, ist jedoch die vollständige Reaktionszeit (5 Minuten) erforderlich. Lesen Sie die Ergebnisse nach 10 Minuten nicht mehr ab.  
5. Entsorgen Sie den Test nach dem Gebrauch. Geben Sie den gebrauchten Teststreifen nach Möglichkeit in einen speziellen Behälter und betrachten Sie ihn als infektiös. Nicht wegwerfen.

**4. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE**  
**NEGATIV:** Nur ein sichtbares farbiges Band im Kontrollbereich, kein farbiges Band im Testbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, bedeutet negativ, kein hCG ist im Urin entdeckt worden. Das bedeutet, dass Sie entweder nicht schwanger sind oder Sie zu früh geprüft haben. Wenn Sie nicht sicher sind, wiederholen Sie den Test in 48 Stunden.  
**POSITIV:** Zwei sichtbare farbige Bänder sowohl im Testbereich als auch im Kontrollbereich, die das Ergebnis des Tests anzeigen, heißt positiv, das bedeutet das, dass es eine starke Möglichkeit gibt, dass Sie schwanger sind — in Ihrem Urin ist hCG entdeckt worden. Eine Linie kann schwächer sein als die andere, sie müssen nicht zusammenpassen, und das ist auch ein positives Ergebnis  
**UNGÜLTIG:** Kein sichtbares farbiges Band (Bänder) überhaupt oder nur ein farbiges Band im Testbereich, die anzeigen, dass der Teststreifen ungültig ist. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen!

**PRÜFVERFAHREN**  
Das Testgerät umfasst kollodiales Gold, das mit einem Anti-β-HCG-Antikörper beschichtet war; Die NC-Membran, beschichtet mit Maus-anti-α-HCG-Antikörpern und Kaninchen-anti-Maus-IgG.

**BESCHRÄNKUNGEN DES VERFAHRENS:**  
1. Alkohol kann das Testergebnis beeinflussen. Es wird nicht empfohlen, den Test nach dem Konsum von Alkohol zu verwenden.  
2. Gelegentlich geben Urinproben, die weniger als 10 mIU/ml enthalten, auch positive Ergebnisse an.  
3. Wenn Sie den Test zu früh ausführen, kann das hCG Niveau noch zu niedrig sein und kann so ein negatives Ergebnis anzeigen. In diesem Fall sollte eine andere Urinprobe mindestens 48 Stunden später entnommen und geprüft werden.  
4. Das hCG Niveau kann mehrere Wochen nach einer normalen Entbindung, Entbindung durch Kaiserschnitt, spontaner Abtreibung oder therapeutischer Abtreibung feststellbar bleiben.  
5. In Fällen, wo ein sehr hohes Niveau von hCG vorhanden ist (> 500.000 mIU/ml) kann ein falsches negatives Ergebnis wegen einer "Pro-Zonen"-Wirkung vorkommen. Wenn immer noch eine Schwangerschaft vermutet wird, einfach die Probe 1:1 mit entsalztem Wasser verdünnen und erneut testen.  
6. Wenn eine Urinprobe zu verdünnt ist (d. h., niedriges spezifisches Gewicht) kann sie kein vertretbares Niveau von hCG enthalten. Wenn eine Schwangerschaft noch vermutet wird, sollte eine erste Morgenurinprobe entnommen werden und nach 48 Stunden erneut getestet werden.  
7. Wie bei jedem diagnostischen Verfahren, sollte der Benutzer die Daten bewerten, die durch den Gebrauch dieses Testkits im Licht anderer klinischer Informationen erhalten sind, und ihren Arzt für die Enddiagnose einer Schwangerschaft vor dem Treffen jeder Entscheidung von medizinischer Relevanz befragen.

**PRÜFVERFAHREN**  
**1. WANN KANN ICH DEN TEST DURCHFÜHREN?**  
Sie können diesen Schwangerschaftstest ab 6 Tage vor dem Tag Ihrer nichterwartenden Periode (5 Tage vor dem Tag der erwarteten Periode), zu jeder Uhrzeit durchführen.

**2. PROBLEMLÖSUNG UND HANDHABUNG:**  
Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Gefäß gesammelt werden. Die erste Urinprobe am Morgen wird bevorzugt, da sie allgemein die höchste Konzentration von hCG enthält; jedoch können Urinproben zu jeder Zeit des Tages entnommen werden.

**3. WIE WIRD DER TEST DURCHFÜHRT?**  
1. Die versiegelte Verpackung muss Raumtemperatur haben. Öffnen Sie den versiegelten Beutel und entfernen Sie den Teststreifen, zu dem mit Testen zu geben.  
2. Legen Sie den Teststreifen senkrecht (gerade) in die Urinprobe. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile nach unten zeigen. Lassen Sie die Urinprobe fließen über die MAX (maximale) Fülllinie (durch Pfeile gekennzeichnet) auf dem Teststreifen hinausgehen.  
3. Entfernen Sie den Streifen nach ca. 10 Sekunden aus dem Urin und legen Sie ihn auf eine saubere, trockene Oberfläche.  
4. Warten Sie, bis farbige Bänder angezeigt werden. Abhängig von der hCG-Konzentration in der Urinprobe können bereits nach 40 Sekunden positive Ergebnisse beobachtet werden. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen, ist jedoch die vollständige Reaktionszeit (5 Minuten) erforderlich. Lesen Sie die Ergebnisse nach 10 Minuten nicht mehr ab.  
5. Entsorgen Sie den Test nach dem Gebrauch. Geben Sie den gebrauchten Teststreifen nach Möglichkeit in einen speziellen Behälter und betrachten Sie ihn als infektiös. Nicht wegwerfen.


## EE JUHEND

• HCG Rasedustest uriinist ONE • HCG Rasedustest uriinist PLUS  
• Mudet: Ribeta • Iseesivaks testimiseks

**KASUTUSOHTARVE.**  
HCG-rasedustest uriinist on moodeld iseseivaks testimiseks, moodab hormooni Human Chorionic Gonadotropin (hCG) olemasolu inimese uriinist raseduse varajaseks avastamiseks.

**KOKKUVÕTE JA SELGUS.**  
Platsenta hakkab raseduse ajal hCG-d tootma, varsti pärast seda, kui loode emakaesineale kinnitub. Tavalliselt saab hCG-d tuvastada kolme rasedusstaadiumis 3–4 päeva jooksul pärast kinnitumist. See on nii tundlik, et seda võib kasutada juba 6 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni ärajäämist (5 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni algust), üksikool miliseis kellaajal. Mida kaugemale on rasedus arenenud, seda kõrgem on hCG tase urineis. See kastiabria dipriba tuvastab hCG uriinist kontsentratsiooni 10 mIU/ml (Milli-International Units) või rohkem. hCG sisaldus mitteamendat naistel on tavalliselt 5,0 mIU/ml. Viimase ärajäänud menstruatsiooni ajal on hCG tase liigkaudu 100 000 mIU/ml, tase on maksimaalne esimese trimestri lõpus (100 000 kuni 200 000 mIU/ml).

**PAKI SISU:**  
1. HCG Rasedustest uriinist ONE: Üks fooliumkott 1 HCG Rasedustest uriinist Ribetast, Kuivatusaine (Viskake ära - Ei tohi süüa), Kasutusjuhend.  
2. HCG Rasedustest uriinist PLUS: Kaks fooliumkotti koos 1 HCG Rasedustest uriinist Ribetast, Kuivatusaine (Viskake ära - Ara söö), Kasutusjuhend.  
**HOUSTAMINE JA STABIILSUS.**  
Testimiskomplekt võib hoida temperatuuril 2 °C kuni 30 °C suletud kotikesse aegumiskuupäevani. Testimiskomplekt võib hoida eemal otsestest pakeerevalgusest, niiskusest ja kuumusest.  
**ETTEVAATUSABINÕUD.**  
**1. ANULIN IN-VITRO DIAGNOSTILISEKS KASUTAMISEKS (IVD), MITTE SEESPIDISEKS KASUTAMISEKS.**  
2. Enne testi tegemist tuleb tähelepanelikult kasutusjuhiseid.  
3. Ärge kasutage pärast aegumiskuupäeva.  
4. Ärge kasutage ribetesti kordvalt. Visake see pärast ühekordest kasutamist prügistaki.  
5. Ärge kasutage ribeta, kui fooliumkott on kahjustatud.  
6. Hoidke ribetesti ainult käepideamist (värilivline ots).  
7. Kui fooliumkott on avatud, tuleb ribetesti kohe kasutada. Pikkemaajaline kokkupuude umbrtase veega niiskusega kahjustab toodet.  
8. Pärast uriniprobe avamist ja kasutamist testimisvahendite potentsiaalselt nakkusohhtikuna. Vältige teha süüstitamist.  
9. Hoidke läte käärlustest eemal.  
**TESTIMISPROTSEDUUR.**  
**1. MILLAL VOIN TESTI TEHA?**  
Võite teha selle rasedustesti juba 6 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni ärajäämist (5 päeva enne eeldatavat menstruatsiooni algust), üksikool miliseis kellaajal.  
**2. PROOVI VÕTMINA JA KÄSTISEMIN**  
Uriniproov tuleb võtta puhtale ja kuiva nõusse. Eelistatav on hommikune esimehe uriin, kuna selle hCG-sisaldus on lühijuhuste ja külm kasutada võib mis tahes kellaajal võetud uriniiproovi.  
**3. TESTI LÄBIVÕMIN**  
1. Suletud pakend peab olema toatemperatuuril. Testimise alustamiseks avage suletud kott ja eemaldage testistreip. Ärge puudutage ribeta nooltega ja keskosa.  
2. Asetage ribetesti vertikaalselt (otsi) uriniiproovi; veenduge, et nooled oleksid suunatud alla.  
3. Ärge laske uriniingul minna ribetesti üle MAX (maksimaalselt) tasemele (tähistatud nooltega).  
3. Eemaldage ribeta uriinist umbes 10 sekundit pärast asetage ribetast puhtale ja kuivale pinnale.  
4. Oodake kuni ilmuvad värvilised triipu ei ole. Olenvald hCG sisaldust uriniprobe võib positiivseid tulemusi olla näha kõigest 40 sekundit. Kui negatiivse tulemuse veendumiseks on vaja oodata, kuni reaktsioonijagu (5 minutit) on möödnud. Ärge loote tulemusi pärast 10 minuti möödmist.  
5. Visake testi pärast kasutamist ära. Pange kasutatud uriinist võimaluse korral spetsiaalsesse konteinerisse ja kätitsede see nakkusohhtikuna. Ärge jätke seda kuhugi vedelema.  
**4. TULEMISTE TÕLGDENAMINE**  
**NEGATIIVNE.** Ainult üks nähtav väriline triip kontrollväljal, testiväljal väriline triip puudub, mis näitab, et testi tulemus on negatiivne, uriinist pole hCG-d tuvastatud. See tähendab, et te pole rase või oletetulemuse testi liiga vara. Kui te pole kindel, korake testi 48 tundi pärast.  
**POSITIVNE.** Kaks nähtavat värilist triipu nii testiväljal kui ka kontrollväljal, mis näitab, et testi tulemus on positiivne. See tähendab, et on väga võimalik, et olete rase – teie uriinist on tuvastatud hCG. Üks juon võib olla tehes heelmed, need ei ole peama ühegsused, tegemist on sellepolest positiivse tulemusega.  
**KEHTETU.** Ühtegi nähtavat värilist triipu ei ole või ainult üks väriline triip testiväljal, mis näitab, et komplekt ei toimi. Korake testi üle testimiskomplektiga!  
**REAKTIIVID:**  
Testimisääsde sisaldas β-HCG-vastase antikehaga kaetud kollidivõidid; HC-membraani, mis on kaetud hiire anti-hCG antikeha ja jänese anti-hiire IgG-ga.  
**PROTSEDUURI PIIRANGUD.**  
1. Alkoholih võib testi tulemust mõjutada. Testi ei soovitata kasutada pärast alkoholi tarbimist.  
2. Aeg-ajalt annavad ka alla 10 mIU/ml sisaldavad uriniiproovid positiivseid tulemusi.  
3. Kui testi liiga vara, võib hCG tase olla liiga madal ja anda negatiivse tulemuse. Sellisel juhul tuleb 48 tundi pärast võtta uus uriniiproov ja seda testida.  
4. hCG tasemed võivad olla tuvastatavad ka mõni nädal pärast normaalset sünnitust, keisriltõugu, seisenuklit või ravisuutuste tehtud abort.  
5. Kui hCG tase on väga kõrge (> 500 000 mIU/ml), võib liiga suure sütt arvude tõttu olla tulemus valenegatiivne. Kui raseduse kahtlus on siiski olemas, lahjendage lihtsalt pruvi deioniseeritud veeaga vahetaks 1:1 ja testige uutest.  
6. Kui uriniinproov on liiga lahja (is väike erimeal), ei pruugi selles olla piisavalt hCG-d. Kui raseduse kahtlus on siiski olemas, tuleks võtta pruov hommikusest esimesest uriinist ja testida uuesti 48 tundi pärast.  
7. Nagu igasuguse diagnostilise protseduuri puhul, peaks kasutada hindama selle komplekti abil saadud andmeid muidu kliinilise andmete kontekstis ja pidama nõu arstiga, kes paneb enne viisakuse meditsiiniliste otustest tegemist lõpliku raseduse diagnoosi.

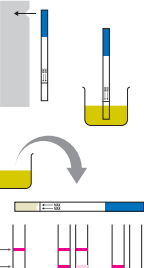

## LV INSTRUKCIJA

• Grūniecības noteikšanas tests HCG urīnā ONE  
• Grūniecības noteikšanas tests HCG urīnā PLUS  
• Modelis: Tests- strēmēle • Priekš- pastēstēšanas

**PAREZĒTĀIS LIETOJUMS:**  
Grūniecības tests HCG noteikšanai urīnā, paredzēts priekš- pastēstēšanas, mēra urīnā atrodama cilvēka horionisko gonadotropi (hCG), lai agrīni noteiktu grūtniecību.

**KOPSAVLIKUMS UN PASKAIDROJUMS:**  
Grūtniecības laikā placenta rada hCG, is pēc tam, kad embrijs pievienojas dzemdes sienai. hCG parasti var noteikt ar mājās grūtniecības testu 3-4 dienas pēc implantācijas. Tas ir tik jutīgs, ka to jebkāra dienas laikā var lietot jau 6 dienas pirms izstrūkstošo mēnesiņu paredzamās pirmās dienas (5 dienas pirms paredzamās mēnesiņu pirmās dienas). Jo ilgāk turpinās grūtniecība, jo lielāks ir hCG līmenis urīnā. Sie grūtniecības un strūkās tests urīnā nosaka hCG koncentrāciju 10 mIU/ml (mIU=Starptautiskās vienības) vai lielāku. Sievietēm, kas nav grūtnieces, hCG koncentrācija parasti ir 5,0 mIU/ml. Pedejo izstrūkstošo mēnesiņu laikā hCG līmenis ir aptuveni 100 mIU/ml; maksimālais vērtības 100 000 līdz 200 000 mIU/ml tiek sasniegtas pirms trimestra beigām.

**IPAĶUOMA SATURS:**  
1. Grūniecības tests caur hCG ONE: Viens folija iepakojums ar testu- strēmēli, zāvējovs līdzeklis (izņem- neest); Lietošanas instrukcija.  
2. Grūniecības tests caur hCG PLUS: Divi folija iepakojumi pa vienam testam- strēmēli un zāvējovs līdzeklis līdzeklis katrā iepakojumā (izņem- neest); Lietošanas instrukcija.  
**GLABĀŠANA UN STABILITĀTE:**  
Testa komplektus drīkst glabāt pie temperatūras no 2 °C līdz 30 °C, noslēgtā maiņā līdz derīguma termiņa beigām datumam. Testa komplektus nedrīkst pakļaut tiešu saulē, mitrumam un karstumam iedarbībai.  
**PESĀRĒZĀTĀIS PASKAIDROJUMS:**  
**1. TIKAI LIETOŠANA IN-VITRO DIAGNOSTIKĀ (IVD), NAV PAREDZĒTIS LIETOŠANA IESKĒJIGI.**  
2. Pirmstestā veiktas izmēģinājuma izpēti Lietošanas instrukcijas.  
3. Nelieliet pēc derīguma beigu testu.  
4. Nezmantojiet testu- strēmēli atkārtoti. Pēc vienas Lietošanas reizes izmetiet to atkritumu tvertnē.  
5. Nelielotiet testu- strēmēli, ja folija iepakojums ir bojāts.  
6. Turiet testu- strēmēli tikai ar zirkus (krāsainās gali).  
7. Kad folijas maisiņi ir atvērti, rīcokats tests jālieto uzreiz. Pakauts apkārtējās vides mitruma iedarbībai, izstrādājums var sabojāties.  
8. Ar urīna paraugus jāizmantojam testa ierīcmē jāstrādā kā ar potenciāli infekciozām. Tās nedrīkst saskārties ar ardu.  
9. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.  
**TESTA PROCEDŪRA:**  
**1. KAD VEIKTU TESTU?**  
So grūniecības testu var veikt jebkāra dienas laikā no 6 dienas pirms izstrūkstošo mēnesiņu pirmās dienas (5 dienas pirms izstrūkstošo mēnesiņu pirmās dienas).  
**2. PARAU GU SAVĀKŠANA UN DARBĀS AR TIEM**  
Urīna paraugs jāsavāc tīrā un sausa konteinērā. Velams izmantot rīta pirmo urīna paraugu, jo tājā parasti ir lielākā hCG koncentrācija, tomēr iespējams izmantot urīna paraugus, kas savākti jebkāra dienas laikā.  
**3. LAI VEIKTU TESTU**  
1. Noslēdziet maisiņu jābūt istabas temperatūrā. Lai sāktu testēšanu, atveriet slēgto maisiņu un izņemiet strūkās testu.  
2. Ievietojiet testu- strēmēli vertikāli (taisni) urīna paraugā; jāpārliecinās, ka bultulins uz testu- strēmēli ir vērstas uz leju. Nelauziet urīna šķidrump un virsmal paciēties virs MAX (maksimālā) līmeņa atzīmē (atzīmē ar bultulīnu) uz testu- strēmēles.  
3. Pēc apmēram 10 sekundēm izņemiet strēmēli no urīna un novietojiet strēmēli uz tīras, sausas virsmas.  
4. Paciešiet, līdz parādās krāsainās svītras. Atkarībā no hCG koncentrācijas urīna paraugā pozitīvu rezultātu var redzēt jau pēc 40 sekundēm. Tomēr lai apstiprinātu negatīvu rezultātu, nepieciešams pilns reakcijas laiks (5 minūtes). Nelasiet rezultātus pēc 10 minūtem.  
5. Pēc Lietošanas izmetiet testu. Ievietojiet izmantoto testu īpaša konteinērā, ar urīna paraugu un izmantojamto testiem rīkojiet tā, kā te būtu potenciāli bīstami. Nemēslīti.  
**4. REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA**  
**NEGATĪVS:** Kontroles zonā tikai viena redzama krāsu joslā, testa reģionā nav krāsainas joslas, kas nozāra, ka testa rezultāts ir negatīvs; urīnā nav noteikts hCG. Tas nozāra, ka Jums ir istājās grūtniecība, jo Jūsu urīnā ir noteikts hCG. Vienu līniju var būt gūstāks par otu, tām nav jābūt vienādm un vienāgs.  
**POSITĪVS:** Ja testu reģionā, gan kontroles reģionā redzamas divas krāsainas joslas; tas nozāra, ka testa rezultāts ir pozitīvs — tas nozāra, ka pastāv liela iespēja, ka Jums ir istājās grūtniecība, jo Jūsu urīnā ir noteikts hCG.  
**NEDERĪGS:** Vienā kontrolreģionā un testreģionā ir redzama viena līnija. Tas norāda, ka tests ir nevalids. Atkārtoti veiciet testu, ņemot vērā tādas pašas līnijas kā abos reģionos.  
**1. Negatīvs 2. Pozitīvs 3. Nederīgs**

